

TRIANGO 60  
Die Kompakte, die hat was es braucht




# TRIANGO 60 – Ihre neue Behandlungs- & kleine Operationsleuchte



**TRIANGO 60 C**  
Deckenversion




**TRIANGO 60 W**  
Wandversion

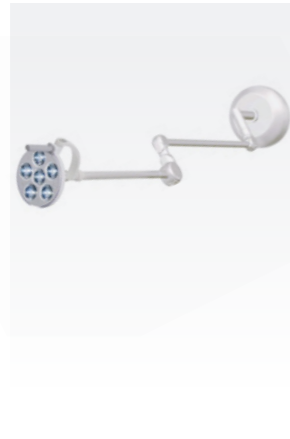

**TRIANGO 60 F**  
Rollstativ



**TRIANGO 60 F  
Battery**  
Rollstativ

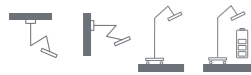

TRIANGO 60	technische Daten
<b>Bestückung</b>	1x LED-Modul
<b>Lichtleistung *</b>	60 000 Lux / 1,0 m
<b>Farbtemperatur *</b>	
TRIANGO 60-1 F	fix 4 700 K
TRIANGO 60-3 F	veränderbar 3 700 / 4 300 / 4 700 K
<b>Beleuchtungsfeld 1,0 m*</b>	ø 18 cm
<b>Ausleuchtungstiefe *</b>	140 cm
<b>Farbwiedergabe</b>	Ra > 93
<b>Betriebsgerät</b>	Elektronischer Konverter
<b>Anschlusswerte</b>	100-240 V; 50/60 Hz
<b>Leuchtgehäuse</b>	Polyamid (PA)
<b>Leistungsaufnahme</b>	< 30 Watt
<b>Bedienung</b>	Folientastatur an Kardanik
<b>Technik</b>	1-polig sekundär
<b>Gelenkentlastung</b>	Feder (Gewichtsausgleich)
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP 43 (Leuchtenkopf) IP 20 (USVmed Pack)
<b>Normen</b>	EN 60601-1, EN 60601-2-41

Besonderheiten	
<b>TRIANGO 60-1</b>	• stufenlos dimmbar
<b>TRIANGO 60-3</b>	• stufenlos dimmbar • 3 Farbtemperaturen
<b>TRIANGO Fokus 60-1</b>	• stufenlos dimmbar • fokussierbar
<b>TRIANGO 60-1 F Battery</b>	• stufenlos dimmbar • USVmed Pack
<b>Befestigung</b>	• Decke • Wand • Rollstativ
<b>Netzanschlussleitung</b>	
TRIANGO 60-1 C	Festanschluss
TRIANGO 60-1 W	Festanschluss
TRIANGO 60-1 F	3 m
TRIANGO 60-1 F Battery	3 m
<b>Gewicht (NETTO)</b>	
TRIANGO 60-1 C	13 kg
TRIANGO 60-1 W	12,5 kg
TRIANGO 60-1 F	19 kg
TRIANGO 60-1 F Battery	31 kg
<b>Zubehör</b>	• Sterilisierbarer Handgriff • Handgriffüberzug

**Vielseitig**  
Versionen mit  
fokussierbarem oder  
farbveränderbarem  
Beleuchtungsfeld

**Homogenes Lichtfeld**  
dank einzigartiger  
Diamantoptik

**Einfaches Reinigen**  
reduzierte Formgebung  
und abnehmbarer,  
sterilisierbarer Handgriff

**Hygiene  
einfach gemacht**  
gutes Design verzichtet  
auf unnötige Details und  
legt Wert auf möglichst  
geschlossene Baukörper



**Ergonomisches  
Handling**  
einfaches Ausrichten für  
Rechts- und Linkshänder



**Intuitives Bedienen**  
dank intuitivem Taster  
kann die Beleuchtungs-  
stärke von 60 000 Lux  
auf 1m stufenlos  
angepasst werden

**Überall einsetzbar**  
die TRIANGO 60 eignet  
sich für den vielseitigen  
Alltag in Hausarztpraxen  
und Kliniken sowie in der  
Gynäkologie, Proktologie,  
Dermatologie oder  
Tiermedizin

Bestellnummer: TRIANGO 60-1	
<b>TRIANGO 60-1 C</b>	D16.250.000-00813741 D16.253.000-00814312 - USA
<b>TRIANGO Fokus 60-1 C</b>	D16.252.000-00814311 D16.255.000-00814314 - USA
<b>TRIANGO 60-1 W</b>	D16.256.000-00813742 D16.274.000-00814327 - USA
<b>TRIANGO Fokus 60-1 W</b>	D16.258.000-00814316 D16.276.000-00814329 - USA
<b>TRIANGO 60-1 F</b>	D16.262.000-00813744 - CH D16.259.000-00813743 - Schuko D16.271.000-00813747 - UK D16.265.000 - USA
<b>TRIANGO Fokus 60-1 F</b>	D16.264.000-00814320 - CH D16.261.000-00814318 - Schuko D16.273.000-00814326 - UK D16.270.000-00814322 - USA
<b>TRIANGO 60-1 F Battery</b>	D16.279.000 - CH D16.278.000 - Schuko D16.282.000 - UK D16.280.000 - USA

Bestellnummer: TRIANGO 60-3	
<b>TRIANGO 60-3 C</b>	D16.251.000-00814310 D16.254.000-00814313 USA
<b>TRIANGO 60-3 W</b>	D16.257.000-00814315 D16.275.000-00814328 USA
<b>TRIANGO 60-3 F</b>	D16.263.000-00814319 - CH D16.260.000-00814317 - Schuko D16.272.000-00814325 - UK D16.266.000-00814321 - USA




\* -10% / +20% Toleranz



## Firmensitz

Derungs Licht AG  
Hofmattstrasse 12  
9200 Gossau  
Schweiz  
+41 71 388 11 66  
mailbox@derungs.swiss  
www.derungs.swiss

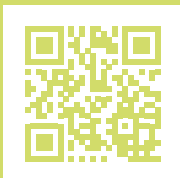

Die Derungs Licht AG  
ist ein Unternehmen  
der Waldmann Group

[www.derungs.swiss](http://www.derungs.swiss)



Registrieren und profitieren:  
+ 1 Jahr Garantie und  
exklusive Angebote

[www.derungs.swiss/product-registration](http://www.derungs.swiss/product-registration)